


HAB

Hörapparatsbatterier (kvicksilverfria)

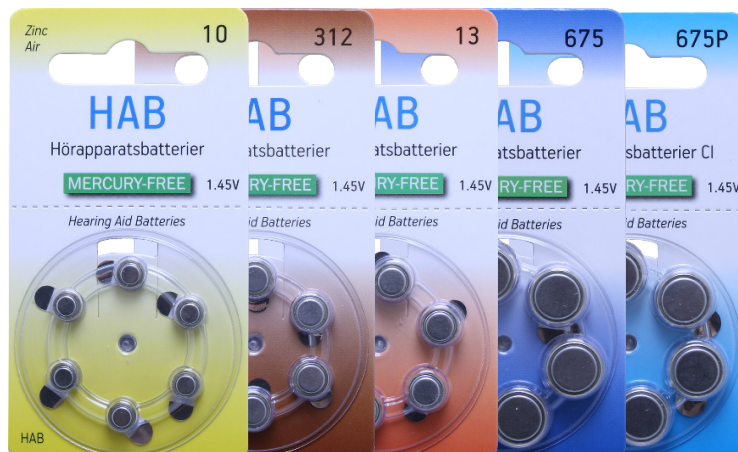

Egenskaper

- Kapacitet (mAh)
 - A10 90 mAh
 - A312 160 mAh
 - A13 265 mAh
 - A675 580 mAh
 - A675P (CI) 530 mAh
- Lång livslängd
- God kvalitet
- Kviksilverfria
- Konkurrenskraftigt pris
- Batterierna är förpackade i 6-pack-snurror

Prisvärt batteri till din hörapparat!

HAB är vårt eget märke av zink/luft-batteri för hörapparater. HAB hörapparatbatteri är ett prisvärt zink/luft-batteri av hög kvalitet.

Användarinformation

- Batterierna mår bäst av att förvaras i rumstemperatur, på ett torrt och gärna lite svalt ställe. Förvara INTE batterierna i kylskåp.
- Batteriet aktiveras genom att dra bort skyddstejpen. Låt gärna batteriet lufta 1-3 minuter innan du sätter in det i hörapparaten.
- Observera att batteriet laddar ur även om du inte använder hörapparaten. Du kan skona batteriet genom att öppna batterifacket på din hörapparat när du inte använder den.
- Lämna dina förbrukade batterier till återvinning.
- Tänk på att förvara batterier och hörapparater utom räckhåll för barn och husdjur.

Art nr Beskrivning

171810	Zink-Luft-batteri HAB MF, A10, 6-pack
171812	Zink-Luft-batteri HAB MF, A312, 6-pack
171813	Zink-Luft-batteri HAB MF, A13, 6-pack
171875	Zink-Luft-batteri HAB MF, A675, 6-pack
171885	Zink-Luft-batteri HAB MF, A675P High Power (CI), 6-pack

Bo Edin AB Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Besök Förrådsvägen 2 B, 181 41 Lidingö

Tel 08-767 18 18 E-post info@edin.se
Fax 08-767 18 20 Internet edin.se • univox.eu



För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr, bruksanvisning och CE-certifikat som kan laddas ner från Dokumentarkiv på www.edin.se. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se.

Hearing excellence since 1965

 **univox**
BY EDIN